



MAJOR PLUS

MOULD CHART





M A J O R

Anterior Moulds Classification

KLASSIFIZIERUNG DER FRONTZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES ANTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFICERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • Ταξινομήση εμπρόσθιων • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÄMRE FORMER

STRUCTURE

GESICHSFORM
STRUCTURE
ESTRUTURAS
CONFORMAZIONE
UDFORMING
MALLI
ΜΟΡΦΗ
CONFORMATIE
CONFORMAÇÃO
FORM

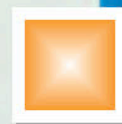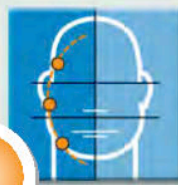


MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO DISTAL
PROFIL MESIO-DISTAL
PERFILE MESIO-DISTAL
PROFILO MESIO-DISTALE
MESIO DISTALPROFIL
MESIO-DISTAALINENPROFILI
Οψη MESIO-DISTAL
PROFIEL MESIO-DISTAL
PERFIL MESIO-DISTAL
MESIO-DISTALPROFIL



LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL
PROFIL LATERAL
PERFIL LATERAL
PROFILO LATERALE
SIDEPROFIL
SIIVUPROFILI
Πλάγια όψη
ZUPROFIEL
PERFIL LATERAL
SIDOPROFIL

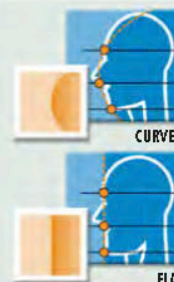

OTHER METHODS

WEITERE METHODEN - AUTRES METHODES - OTROS METODOS - ALTRI METODI - ANDRE METODER - MUITAMENETELMIÄ - Άλλες Μέθοδοι - ANDERE METHODEN - OUTROS MÉTODOS - ANDRA METODER

	mm	mm	Upper Anteriors	Upper Anteriors	Upper Anteriors
	46/49	6,90/7,60	21A	—	32-20
	50/52	7,60/8,00	42A-44-13	56-58	—
	53/54	8,00/8,30	47	52	35-22-53-25
	55/56	8,30/8,60	17	47-37	25
	57/61	8,60/9,40	40	27A-59	17A-66A-27-62


	mm	mm	Upper Anteriors	Upper Anteriors	Upper Anteriors
	30/31	37,5/40,7	21A	—	20
	32	40,4/43,2	44-13	56-52	32
	33	42,2/44,5	42A-13	58-52	35-22-25
	34/35	44,0/47,2	47-17	48-37-59	66A-25-53
	36/37	46,7/49,8	40	27A	17A-27-62

	mm	mm	Upper Anteriors	Upper Anteriors	Upper Anteriors
	4,5/4,7	6,70/7,60	21A-44	56	32-20
	4,8/4,9	7,20/8,00	42A-44-13	56-58-52	32-20
	5,0/5,1	7,50/8,30	44-13-47	56-58-52	20-32-22-53
	5,2/5,3	7,80/8,50	47	58-52-48-37	66A-35-22-53-25
	5,4/5,7	8,30/9,30	40-17	27A-48-37-59	17A-27-62-25

	mm	mm	Upper Anteriors	Upper Anteriors	Upper Anteriors
	111/120	36,7/40,0	21A	—	—
	120/125	40,0/42,0	44	56	20-32
	126/130	42,0/43,3	44-13	56-58-52	35
	130/135	43,3/45,3	42A	—	35-22-25-53
	136/140	45,3/46,7	47-17	48-37-59	66A
	140/145	46,7/48,7	40	—	27
	146/155	48,7/52,0	—	27A	17A-62

Choice
system
in relation
to the size

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU
SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE
METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA
MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA
MÄLING EFTER KROPPSBYGNINGEN
MITOITUS RUUMINRAKENTEEN PERUSTEELLA
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIFIEKE VORMEN
MEDICAÇÃO SEGUNDO A ESTATURA
MÄTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD

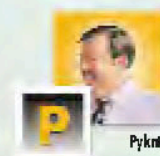



MAJOR PLUS

Synthetic polymer teeth
for dental prosthesis.
Anteriors and Posteriors.

Posterior Moulds Classification

KLASSIFIZIERUNG DER BACKENZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES POSTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS POSTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME POSTERIORI • KLASSIFICERING AF BAGPROFILERNE • POSKIHAMMASMALLIEN LUKKITTU • Ταξινόμηση οπίσθιων • CLASSIFICATIE VAN DE ACHTERVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS POSTERIORES • INDELNING AV BAKRE FORMER

Total and partial prosthesis

Total and partial prosthesis • Total- und Teilprothetik • Prothèse totale et partielle • Prótesis total y parcial • Protesi totale e parziale • Fuldstændig eller ufuldstændig protese • Koko- ja osaproteesi • Όλική και μερική τεχνητή οδοντοστοιχία • Totale en gedeeltelijke prothese • Prótese total e parcial • Hel- och delproteser

Total prosthesis with natural antagonist

Totalprothetik mit natürlichen Antagonisten • Prothèse totale avec antagoniste naturel • Prótesis total con antagonista natural • Protesi totale con antagonista naturale • Fuldstændig protese med naturligt modstykke • Yhden leuan kokoproteesi • Όλική τεχνητή οδοντοστοιχία με φυσικό ανταγωνιστή • Totale prothese met natuurlijke antagonist • Prótese total com antagonista natural • Helprotes med naturlig antagonist

Skeletal and combined prosthesis

Skelettierte- und Kombinationsprothetik • Prothèse squelettée et combinée • Prótesis esqueléticas y combinada • Protesi scheletrata e combinata • Skelet- eller kombineret protese • Ranka- ja yhdistelmäproteesi • Τεχνητή οδοντοστοιχία σκελετική και συνδυασμένη • Uitneembare of gecombineerde prothese • Prótese esquelética e combinada • Skelettproteser och kombinerade proteser

Temporary prosthesis

Provisorien • Prothèse provisoire • Prótesis provisionales • Protesi provvisoria • Midlertidig protese • Tilapäinen proteesi • Τεχνητή οδοντοστοιχία προσωρινή • Tijdelijke prothese • Prótese provisória • Provisoriska proteser

Prosthesis on implant


Implantat-Versorgungen • Prothèse sur implant • Prótesis sobre implantes • Protesi su impianti • Protese på anlæg • Keinojuuriin tuettu proteesi • Τεχνητή οδοντοστοιχία επί εγκατάστασης μεταλλικής λάμας • Prothese met implantaat • Prótese sobre estrutura • Proteser på fästen



Prosthesis with lingual occlusion

Prothetik nach der Zungenabstützungs-Technik • Prothèse avec occlusion linguale • Prótesis con montaje lingualizado • Protesi con montaggio lingualizzato • Protese med lingvalmontering • Proteesi, jossa linguaalisesti asetellut hampaat • Τεχνητή οδοντοστοιχία με μοντάρισμα lingualized • Prothese met linguale bevestiging • Prótese com montagem lingualizado • Proteser med lingvalmontering

MAJOR PLUS		MAJOR DENT	
High Anatomic Posteriors	Technical Posteriors	Flat Plane Posteriors	Medium Anatomic Posteriors
HA	T	FP	MA
HA	-	-	MA
HA	-	-	MA
HA	T	FP	MA
HA	T	FP	MA
HA	-	-	MA


3D - Engineered MOULDS

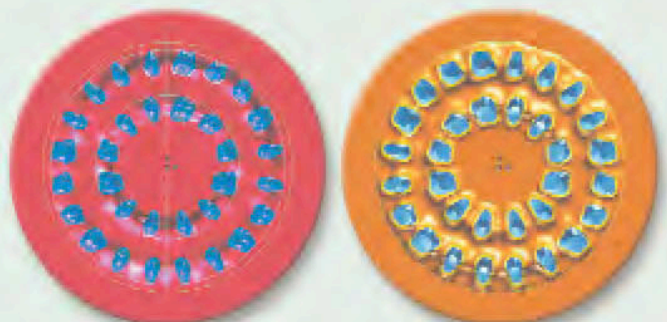

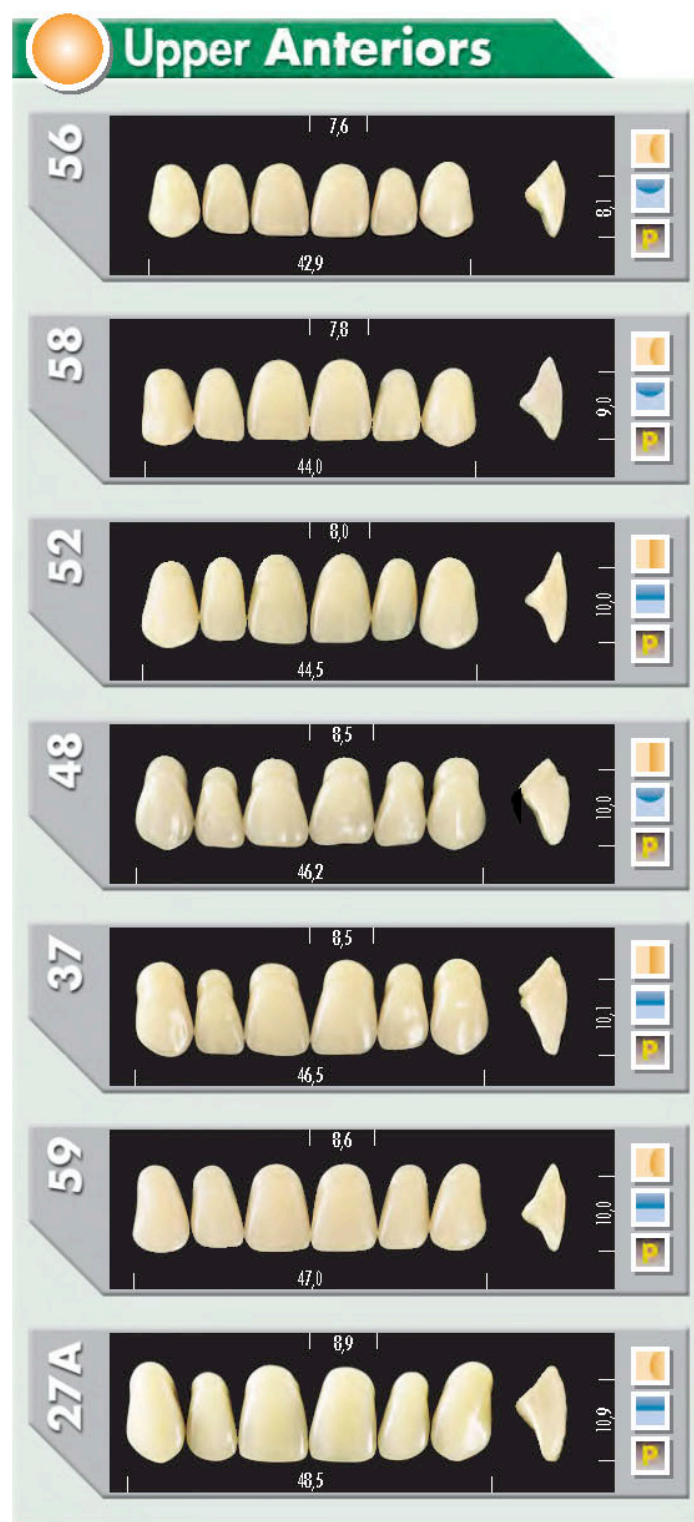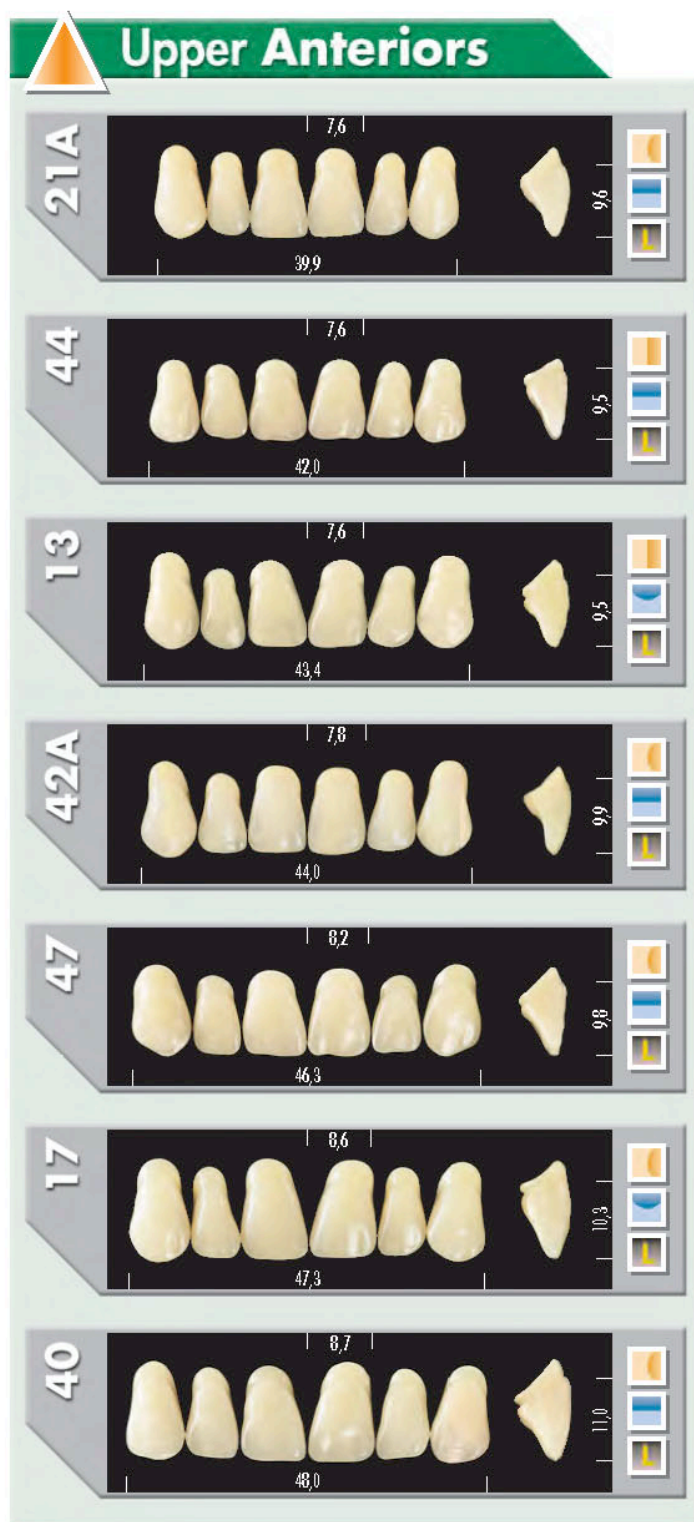

STRUCTURE

GESICHSFORM
 STRUCTURE
 ESTRUCTURAS
 CONFORMAZIONE
 UDFORMING
 ΜΑΛΛΙ
 ΜΟΡΦΗ
 CONFORMATIE
 CONFORMAÇÃO
 FORM

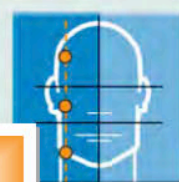



Upper Anteriors

20



32



22



35



53



25



66A



27



62



17A



Lower Anteriors

03



04



00



05



06



012



053



08



010



011



High Anatomic Posteriors

A30




A31



A32



A33

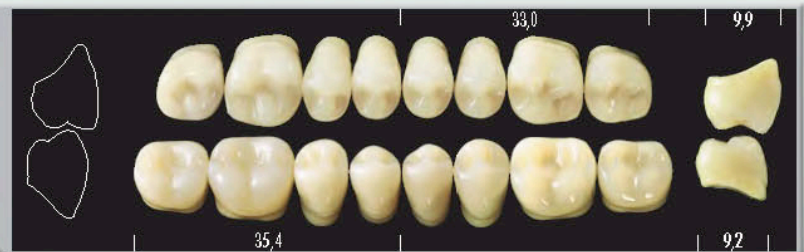

A34



Choice SYSTEM

in relation to the size

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU
 SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE
 METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA
 MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA
 MÄLING EFTER KROPSBYGNINGEN
 MITOITUS RUUMIINRAKENTEEN PERUSTEELLA
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΣΗΣ
 METINGEN OP BASIS VAN LICHAAAMSSPECIFIEKE VORMEN
 MEDIÇÃO SEGUNDO A ESTATURA
 MÄTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD




L

Leptosomal



P


Pyknic

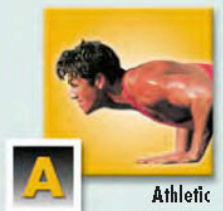

A

Athletic

Technical Posteriors

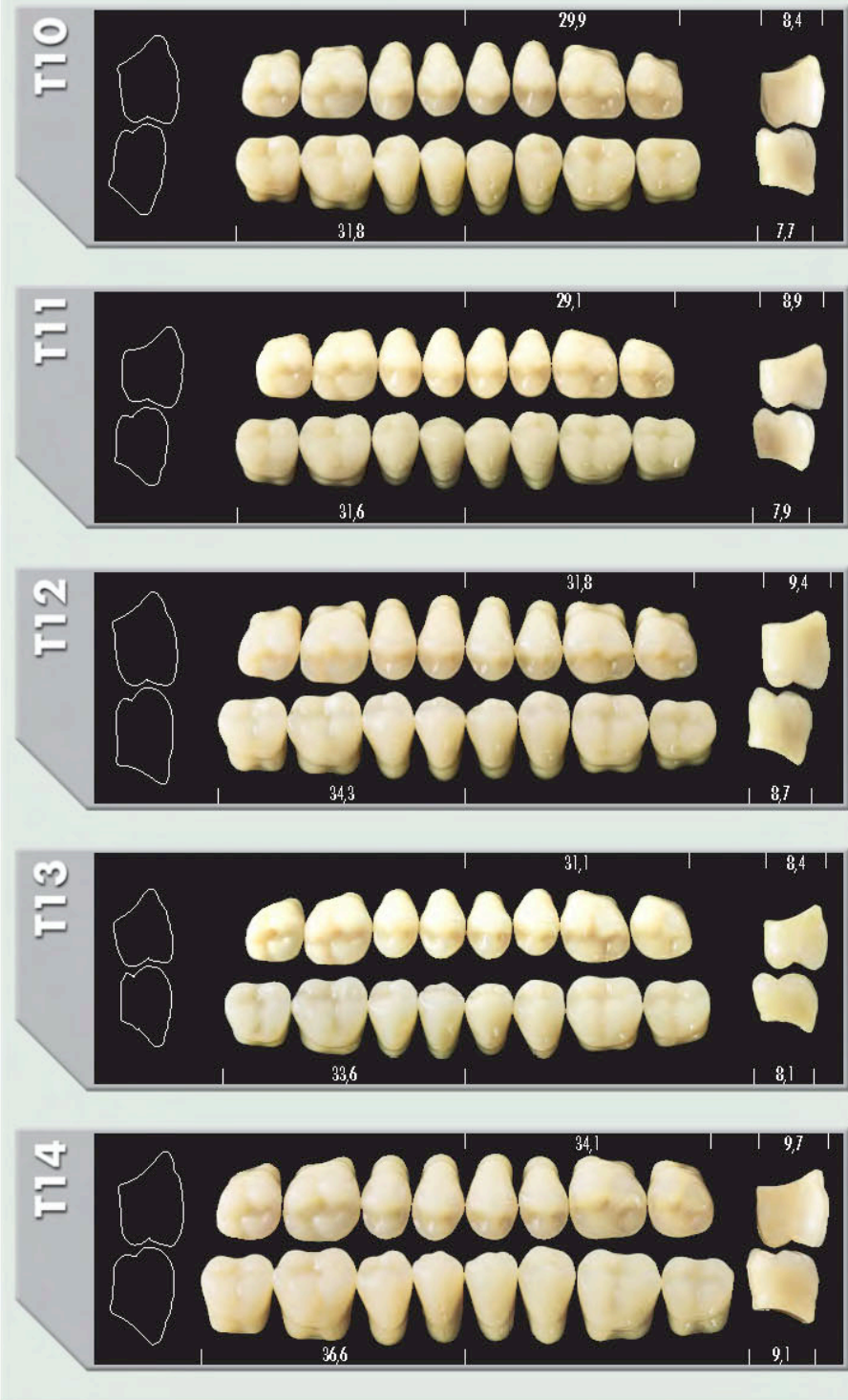

Combination CHART

ARTIKULATIONS-TABELLE
TABLEAU D'ARTICULATION
TABLA DE ARTICULACION
TABELLA DI ARTICOLAZIONE
OVERSICHT OVER ARTIKULATION
PUUNTATAULUKKO
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ARTICULATIETABEL
TABELA DE ARTICULAÇÃO
TABELL ÖVER LEDRÖRELSE

Anteriors		Posteriors	
Upper	Lower	HA	T
21A	03•00	A30	T11
44	04•05	A31	T13
13	05•06	A31•A32	T13
42A	05•06	A31•A32	T13
47	08•06	A33	T12•T13
17	08•10	A33	T13•T12
40	10•11	A33•A34	T12•T14
56	00•04	A30•A31	T13•T11
58	05•053	A31•A32	T13•T11
52	53•06	A33	T10
48	06•08	A33	T10•T13
37	08•010	A33•A34	T12•T13
59	53•08	A33	T10•T13
27A	012•10	A33•A34	T12•T14
20	03•04	A30	T11
32	00•05	A31	T11•T13
22	05•053	A31•A32	T13
35	06•053	A32•A33	T10•T13
53	53•06	A31•A32	T13
25	08•053	A32•A33	T10•T13
66A	05•08	A32•A33	T12•T13
27	10•11	A33•A34	T12•T14
62	11•12	A33•A34	T12•T14
17A	10•11	A34	T14

MAJOR PLUS


T2011 Anterior Set A1-D4 x 6
T2012 Posterior Set A1-D4 x 8
T2019 Complete Set A1-D4 x 28



Available SHADES



A1 - D4

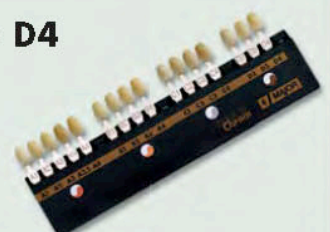

EN SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

- Store in a clean, dry place away from light.
- To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
- Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
- This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
- Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
- Dispose conforming to local law. Product and packing material are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC 1(4). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
- Available in the following shade guides: A1-D4.

ES DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES

- Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
- Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, fresar el talón de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.
- Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no cepille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en álcali, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.
- Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 67/548/EEC y revisiones sucesivas. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad Materiales.
- El acabado genera polvo clasificado como "no clasificables de otro modo". No inhalar, utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA.
- Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC 1(4). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).
- Disponible en las guías de colores: A1-D4.

FI SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAAT HAMMASPROTEESIEJÄ VARTEN

- Säilytettävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
- Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeeriin, ennen asennusta ja vahvan poiston jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tulee poistaa metyylimetakrylaattimonomeerilla.
- Potilaasta on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelma, sekä häntä on varoitettava harjaamasta hampaita liian niiden liiallisen kulumisen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava upottamasta hampaita emälsiseen aineeseen, happoon tai muihin vahingoittaviin aineisiin.
- Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai dierktivissä 67/548/EEC tai sitä seuraavissa direktiivissä mainittuja vaarallisia aineita. Näin ollen tuotteessa ei ole Valmistusaineiden Turvallisuusmerkkiä.
- Viimeistelykäsittelyssä syntyvä "muuten luokittelemattomia" pölyaineita. Pölyaineita ei saa päästää hengityskanaviin, on käytettävä tarkoituksen sopivia suojuksia sekä sovelletaan TLV/TWA.
- Tuotteiden aiheuttamien jätteiden sovelletaan paikallisia jätteenhoitolakeja. Valmistusaine tai pakkauskaset eivät kuulu Vaarallisten Jätteiden luettelossa C.D. 91/689/EEC 1(4) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat putuneet kosketuksiin pottiaan kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätteenhoitoon kannalta katsottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteiden luettelo, n. 180103).
- Saatavissa värikskaalissa: A1-D4.

PT DENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESES DENTÁRIAS

- Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
- A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasar e desengordurar os dentes com monômero de metil-metacrilado, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
- Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.
- Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/548 EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.
- A operação de acabamento provoca poeira de tipo "não classificáveis de outro modo". Não inalar e usar protecções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.
- Eliminar como refulos de acordo com as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Refugos Perigosos C.D. 91/689/EEC 1(4). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infeção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Refugos Perigosos n. 180103).
- Disponível nas escalas de cores: A1-D4.

DE KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

- Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
- Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesenkunststoff sollten an den Zähnen Retensionen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Monomer entfetten.
- Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.
- Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der nachfolgenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt bezüglich des Materials bei.
- Bei der Feinbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. Verwendung von TLV/TWA. Staub nicht einatmen.
- Entsorgungshinweise: Weder das Material noch die Verpackung sind im Katalog für gefährliche Abfallstoffe C.D. 91/689/EEC 1(4) aufgelistet. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischen Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr.180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.
- In folgenden Farbabstufungen lieferbar: A1-D4.

IT DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI

- Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
- Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.
- Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
- Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/EEC e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
- La finitura genera polveri classificate come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
- Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC 1(4). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
- Disponibile nelle scale colori: A1-D4.

EL ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΣ

- Δποθήκευση σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.
- Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης με το ακρυλικό, τρίψτε τα δόντια και απολυμάνετε με μονομερές μεθacrylicού με θαλασίου πριν το μοναλόγισμα και μετά την απολύωση.
- Συμβουλίζετε τον ασθενή να υιοθετήσει τις αρχές της καθημερινής υγιεινής, να μην βουρτσίζει υπερβολικά την οδοντοστοιχία και να μην την βουρτίζει σε αλκάλια, άλλες διαβρωτικές ουσίες και οξέα.
- Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς σύμφωνα με την οδηγία 67/548 EEC. Κατά συνέπεια δεν διέπεται i Δελτίο αοράλσας 71ακού.
- Τα τροχιζόμενα δόντια παράγουν σκόνης που προσδιορίσθηκαν ως "όχι διαφορετικά ταξινόμησης". Μην εισπνεύετε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία. Εφαρμόζονται οι κανόνες TLV/TWA.
- Κατά σπρέντε τα υπολείμματα του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το προϊόν και η συσκευασία του δεν περιέχονται στην κατάσταση επικίνδυνων απορριμμάτων C.D. 91/689/EEC 1(4). Υπό ρχει κίνδυνος μόλυνσης αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή και είναι υποχρεωτική η καταστροφή του σύμφωνα με την οδηγία (ευρωπαϊκή) καταγραφής των επικίνδυνων γλυκών N. 180103).
- Διατίθεται στα χροματολόγια: A1-D4.

SV TÄNDER AV SYNTEETISK POLYMER FÖR TANDPROTESER

- Bör förvaras på torr, ren och ljusskyddad plats.
- För att garantera en maximal adhesion av polymeren för protesbasen skall tänderna släpas och avfettas med monomeren metylmetakrylat. Detta skall göras innan de monteras och efter att växat avlägsnats.
- Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstade sliter på tänderna samt att protesen inte skall läggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.
- Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och är i enlighet med direktiv 67/548 EEC och efterföljande. Det förekommer således inget Säkerhetsdatablad.
- Vid polering uppstår damm som definieras "ej på annat sätt klassificerbar". Undvik inandning och använd lämpliga skydd, TLV/TWA tillämpas.
- Avfallet skall omhändertas enligt lokala bestämmelser. Material och förpackningar finns inte upptagna i förteckningen över Farligt Avfall C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter att materialet har kommit i kontakt med patienten förekommer infektionsrisk, även efter att materialet omhändertagits. (Europeisk Förteckning över Farligt Avfall n. 180103).
- Finns disponibel i färgskalor: A1-D4.

FR DENTS EN POLYMERE SYNTHETIQUE POUR PROTHESES

- A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
- Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide du monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
- Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.
- Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité matériaux n'est jointe au produit.
- L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiées". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.
- Éliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériau et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC 1(4). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).
- Disponible en teintiers: A1-D4.

DK TÆNDER AF SYNTEETISK POLYMER TIL PROTESER

- Skal opbevares på et tørt, rent sted og ikke udsættes for sollys.
- Proteseudergene klæber bedst fast til polymeren, hvis man sliber tænderne og afedter med methylmethacrylmonomer før påmontering og efter vaskfjerning.
- Informér patienten om anvendelse af de daglige hygiejneretabler og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved ikke at børste for meget og undlade dypning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.
- Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548 EEC og følgende. Derfor findes der ikke et Materiale sikkerhedskort.
- Overfladebehandlingen fremkalder støvparkler, der betragtes som "ikke på anden vis klassificerbare". Undgå indånding, anvend passende beskyttelsesmidler; TLV/TWA kan benyttes.
- Bortskaffelse som affald i overensstemmelse med lokal lovgivning. Materialet og emballagen er ikke opgjort på listen over farligt affald. C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter kontakt med patienten er materialeme udsat for infektionfare, også hvad angår bortskaffelse (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).
- Findes i følgende farveskalaer: A1-D4.

NL TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
- Voor een optimale aanhechting van het polymeer aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methylmethacrylaat.
- Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voorrijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkalien, zuuren of andere agressieve middelen.
- Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidsschema met betrekking tot materialen meegeleverd.
- Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedefinieerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
- Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC, artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europese Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
- Verkrijgbaar in de volgende kleurschalen: A1-D4.

SALE FORMAT

A1 D4	T2011	Anterior set	x6
	T2012	Posterior set	x8
	T2019	Complete set	x28



MAJOR Prodotti Dentari S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 23 - 10024 Moncalieri - ITALY

Tel +39 011 6400211 - Fax +39 011 6402325

www.majordental.com - info@majordental.com

ADA 15
ISO 3336

Typo I-II
Typo 1-2

