

**MAJOR
TOTAL
SOFT**

 **MAJOR**

MAJOR TOTAL SOFT

Permanently soft, polyvinyl siloxane liner for direct and indirect use.
Biocompatible, antibacterial, anallergic material. It doesn't release monomer and heat.

Major Total Soft can be used as a:

• Direct liner

Major Total Soft can be directly used in the dental cabinet to optimize denture stability and to obtain more accurate values.

• Therapeutical medium

Major Total Soft is used after extractions or implantological surgical operations in order to supply a soft and anallergic support to the patient and to make a quick recovery of the mucous membranes.

• Stabilizing medium

Major Total Soft can be used for compensating areas of mucous membranes which vary in resilience, sharp bony ridges or deep undercuts which may cause sufferings or denture instability. Major Total Soft, in fact, due to its excellent elasticity and softness, reduces masticatory loads, relieves pain and gives stability to the prosthesis.

• Temporary material

Major Total Soft can be used as a temporary material with every kind of total or partial prosthesis.

• Indirect liner

Major Total Soft can be processed in a dental laboratory, using standard reliners (Major Reliner) to rebase prosthesis.

• Repairing material


Both Major Total Soft base mass and its relevant Silicone Sealant can be employed in operations requiring to add or apply material on the prosthesis, even if the patient has already used the prosthesis for several days.



DEUTSCH	Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis, zur direkten und indirekten Anwendung. Biokompatibles Material, nicht allergisch, antibakteriell, Monomerkfrei, und entwickelt keine Wärme. Anwendungsgebiete von Major Total Soft: DIREKTE-UNTERFÜTTERUNG: In der zahnärztlichen Praxis auf nicht stabilen Prothesen, um die Haltbarkeit und Stabilität zu erhöhen. Erlaubt genauere Werte zu ermitteln.	THERAPEUTISCHE STÜTZE: Total Soft für die Therapie: Findet Anwendung nach der Zahnextraktion und Entlastung des Operationsgebietes nach der Insertion von Implantaten. Garantiert dem Patienten eine weiche Stütze ohne Irritationen und gewährleistet eine bessere Heilung der Schleimhaut. STABILISATIONS-STÜTZE: Total Soft in den Unterschnitten: Wird bei Patienten mit beweglicher Schleimhaut, scharfen Knochenkanten sowie scharfen Unterschnitten, welche zu Schmerzen	oder zu einer nicht stabilen Prothese führen können, angewandt. Auf Grund der Elastizität und weichen Konsistenz des Materials wird die Kaubelastung verringert, vermindert somit den Schmerz und sorgt für die Stabilität der Prothese. PROVISORISCHE STÜTZE: Major Total Soft wird als provisorisches Material für jeden beliebigen Typ von Total- oder Teilprothesen angewandt. INDIREKTE UNTERFÜTTERUNG: Major Total Soft wird im Labor mit Hilfe von normalen Unterfütterungs-Geräten (z.B. Major
FRANÇAIS	Matériau pour rebasage souple à base de vinyle polysiloxane pour application directe ou indirecte. Matériau biocompatible, anallergique, anti-bactérien, sans dégagement de chaleur, ni monomère. Major Total Soft peut être employé comme: REBASAGE DIRECT: Utilisé au cabinet dentaire sur des prothèses instables pour améliorer la tenue et la stabilité de la	prothèse. SUPPORT THERAPEUTIQUE: Soulager la zone opératoire après la pose d'implants en garantissant au patient un appui mou et non irritant pour améliorer la guérison de la muqueuse. SUPPORT STABILISANT: Dans le cas de contre dépouille lorsque le patient présente une crête flottante ou pour soulager les arêtes osseuses vives qui peuvent causer des douleurs et l'instabilité de la prothèse. Major Total Soft grâce à son élasticité et sa souplesse	diminue les charges durant la mastication et assure la stabilisation de la prothèse. SUPPORT PROVISOIRE: Major Total Soft est employé comme matériau provisoire pour n'importe quel type de prothèse totale ou partielle. REBASAGE INDIRECT: Major Total Soft est employé au laboratoire avec une presse à rebaser (comme le Major Reliner) pour le rebasage des prothèses.
ESPAÑOL	Material de rebase morbido a base de vinilpolisiloxano para aplicación directa o indirecta. Material biocompatible, analérgico y anti-bacterico, no deja ni monomero ni calor. Major Total Soft puede ser utilizado para: REBASE DIRECTO: Utilizado en la clinica dental sobre protesis inestables para mejorar la estabilidad y permitir tomar valores mas exactos.	SOPORTE TERAPEUTICO: Major Total Soft utilizado despues de la extracción, o despues de insertar implantes, garantiza al paciente un apoyo morbido y no irritante para una mejor curación de la mucosa. SOPORTE DE ESTABILIDAD: Major Total Soft en las socavaduras es utilizado cuando el paciente presenta mucosa móvil o espinas osseas o socavaduras muy evidentes que pueden causar dolor o inestabilidad de la protesis. Major Total Soft con su	elasticidad y morbilidad reduce las cargas de masticación reduciendo el dolor y estabilizando la protesis. SOPORTE PROVISORIO: Major Total Soft es utilizado como material provisional con todo tipo de protesis total o parcial. REBASE INDIRECTO: Major Total Soft es utilizado en laboratorio dental con el auxilio de bridas verticales normales (Major Reliner) para rebasar la protesis. MATERIAL DE REPARACION: La silicon de base y la silicona
ITALIANO	Materiale per ribasatura morbida a base di vinilpolisilossano per applicazioni dirette ed indirette. Materiale biocompatibile, anallergico ed antibatterico, non rilascia monomero né calore. Major Total Soft può essere impiegato come: RIBASATORE DIRETTO: Major Total Soft è utilizzato nello studio dentistico su protesi instabili per migliorarne la tenuta e la stabilità e	permettere di rilevare valori più precisi. SUPPORTO TERAPEUTICO: Major Total Soft è impiegato come postestrattivo, o post chirurgico implantare, garantisce al paziente un appoggio morbido e non irritante per la migliore guarigione della mucosa. SUPPORTO STABILIZZANTE: Major Total Soft viene impiegato nei casi in cui il paziente presenti mucosa mobile, spine ossee o sottosquadri molto accentuati che possano causare dolore o instabilità	della protesi. Major Total Soft grazie alla sua elasticità e morbidezza, diminuisce i carichi di masticazione riducendo il dolore e stabilizzando la protesi. SUPPORTO PROVVISORIO: Major Total Soft viene impiegato come materiale provvisorio con qualunque tipo di protesi totale o parziale. RIBASATORE INDIRETTO: Major Total Soft viene impiegato in laboratorio, con l'ausilio di normali verticalizzatori (tipo Major Reliner)

Main Features:

- Major Total Soft has fluid consistency, it is easy to apply and it prevents air voids being entrapped during the dispensing of the material.
- Thank to its high resilience and final softness, Major Total Soft is well tolerated by patients.
- The silicone soft liner is a hydrophobic material and, combined with its relevant sealer (Silicone Sealant), it avoids liquids absorption and protects the prosthesis from infiltrations.
- Major Total Soft is monomer free.
- Major Total Soft is biologically inactive.
- The adhesive (MTS Adhesive) bonds the silicone soft liner to the denture acrylic reliably.
- Major Total Soft is smooth and dimensionally stable.
- Major Total Soft resists to the tensions exerted by masticatory loads.
- The silicone surface has no porosity and inhibits bacterial settling.
- Major Total Soft can be used directly by the dentist or it can be processed in a laboratory using standard reliners.
- The material is fully odourless and it doesn't lose colour.
- Major Total Soft is supplied in a pale rose colour suitable for every aesthetical need.

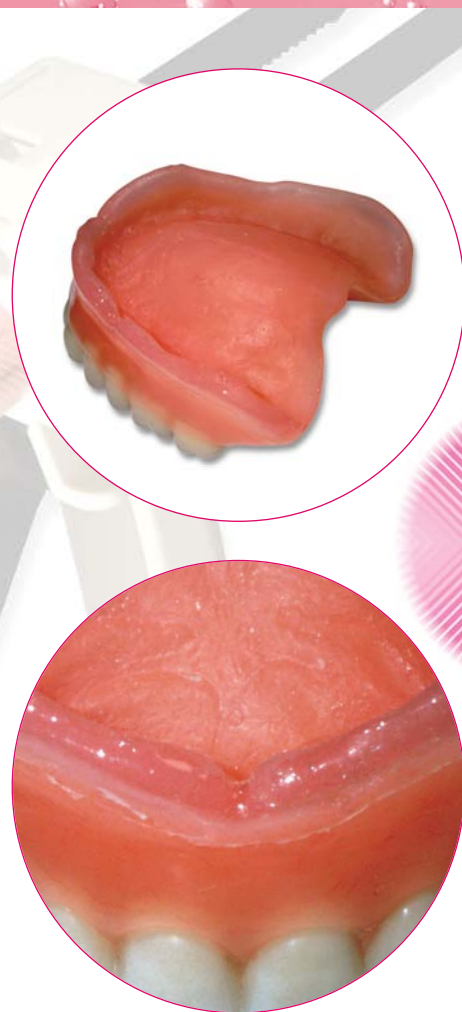

Reliner) für Prothesen, angewandt.

REPARATUR-MATERIAL: Die Basismasse und das Versiegelungs-Silikon kann für eine eventuelle Material-Zugabe auf der Prothese, auch in einer zweiten Phase, wenn die Prothese bereits seit mehreren Tagen vom Patienten getragen wurde, angewandt werden.

EIGENSCHAFTEN:

- Major Total Soft besitzt eine fließfähige Konsistenz, ist leicht anwendbar und vermeidet Bildung von Blasen.
- Major Total Soft wird vom Patienten auf Grund seiner hohen End-

Plastizität und weichbleibenden Konsistenz sehr gut angenommen.

- Das wasserabweisende Basis-Material mit dem Versiegelungs-Silikon vermeidet Flüssigkeits-Absorption und schützt die Prothese gegen Infiltrationen.
- Major Total Soft ist frei von Monomer.
- Major Total Soft entwickelt keine biologischen Reaktionen.
- Die Anwendung der Rapid-Haftflüssigkeit garantiert eine perfekte Haftung des Materials auf der Prothese.
- Major Total Soft ist weich und weist keine Dimensions-Veränderung

auf.

- Major Total Soft besitzt hohen Widerstand gegen Kaukraft-Spannungen
- Weist keine Porositäten auf und ist antibakteriell.
- Major Total Soft kann direkt am Patienten oder im Labor mit Hilfe eines Unterfütterungsgerätes indirekt angewandt werden.
- Das Material ist geruchsfrei und farbstabil.
- Durch die rosa-transparente Farbe des Materials ist Major Total Soft für alle Prothesen geeignet.

MATERIAU DE REPARATION: La masse base et le "Sealant" peuvent être employés comme apport de matériau sur les prothèses, même en deuxième phase, après que le patient ait porté la prothèse pendant plusieurs jours.

CARACTÉRISTIQUE:

- Major Total Soft a une consistance fluide, qui s'applique facilement, en évitant la formation de bulles.

- Major Total Soft est remarquablement toléré par les patients de par son élasticité et sa souplesse finale.
- Le matériau de base hydrofuge combiné avec le "Sealant" évite l'absorption des liquides en préservant la prothèse des infiltrations.
- Major Total soft est biologiquement inerte.
- L'emploi de l'adhésif rapide garantit l'adhésion parfaite du matériau sur le support.
- Major Total Soft est souple et stable dimensionnellement.

- Major Total Soft résiste aux tensions dues aux charges de la mastication.
- Major Total Soft est anti-bactérien et ne présente pas de porosités.
- Major Total Soft peut être employé directement sur le patient ou utilisé au laboratoire avec l'aide d'une presse à rebaser.
- Le matériau est complètement inodore et ne se décolore pas.
- Sa couleur rose transparent le rend esthétique sur n'importe quel support.

de sellado pueden ser añadidas sobre la prótesis, también en segunda fase, después que el paciente ha llevado la prótesis por unos días.

CARACTERISTICAS:

- Major Total Soft es de consistencia fluida, se aplica fácilmente y evita la formación de burbujas.
- Major Total Soft es soportado optimamente por los pacientes por su elevada elasticidad y morbidez final.
- El material de base, que no absorbe agua, juntamente a la silicona

de sellado evita la absorción de líquidos y preserva la prótesis de infiltraciones.

- Major Total Soft es ausente de monomero.
- Major Total Soft es biológicamente inerte.
- El empleo del adhesivo rápido garantiza la perfecta adhesión del material al soporte.
- Major Total Soft es morbido y estable en dimension.
- Major Total Soft resiste a las tensiones de las cargas de

masticación.

- No hay porosidad y es anti-bacterico.
- Major Total Soft puede ser utilizado directamente sobre el paciente o utilizado en laboratorio con el auxilio de bridas verticales.
- El material es completamente inodoro y no decolora.
- Su color rosa transparente lo hace apto estéticamente a todo soporte.

per la ribasatura delle protesi.

MATERIALE DA RIPARAZIONE: la massa base ed il sigillante possono essere impiegati per eventuali interventi di apporto di materiale sulla protesi, anche in seconda fase, dopo che il paziente ha portato la protesi per diversi giorni.

CARATTERISTICHE:

- Major Total Soft ha consistenza fluida, si applica facilmente ed evita la formazione di bolle.

- Major Total Soft è tollerato ottimamente dai pazienti per l'elevata elasticità e morbidezza finali.
- Il materiale di base idrorepellente combinato con il sigillante evita l'assorbimento di liquidi e preserva la protesi da infiltrazioni.
- Major Total Soft è privo di monomero.
- Major Total Soft è biologicamente inerte.
- L'impiego dell'adesivo rapido garantisce la perfetta adesione del materiale al supporto.

- Major Total Soft è soffice e stabile dimensionalmente.
- Major Total Soft resiste alle tensioni esercitate dai carichi masticatori.
- Non presenta porosità ed è antibatterico.
- Major Total Soft può essere impiegato direttamente sul paziente o utilizzato in laboratorio con l'ausilio di un verticalizzatore.
- Il materiale è completamente inodore e non decolora.
- Il colore rosa trasparente è adatto esteticamente ad ogni tipo di supporto.

TECHNICAL DATA:
SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
SPECIFICHE TECNICHE:

	DIRECT RELINE REBASAGE DIRECT DIREKTE UNTERFÜTTERUNG REBASE DIRECTO RIBASATURA DIRETTA	INDIRECT RELINE REBASAGE INDIRECT INDIREKTE UNTERFÜTTERUNG REBASE INDIRECTO RIBASATURA INDIRETTA
TOTAL WORKING TIME: TEMPS DE TRAVAIL TOTAL: GESAMTVERARBEITUNGSZEIT: TIEMPO DE TRABAJO TOTAL: TEMPO DI LAVORO TOTALE:	2'15"	2'15"
INTRAORAL SETTING TIME: TEMPS DE SEJOUR EN BOUCHE: MUNDVERWEILDAUER: TIEMPO DE PERMANENCIA EN BOCA: TEMPO DI PERMANENZA IN BOCCA:	3'15"	not applicable absent entfällt no tiene lugar non applicabile
SETTING TIME: TEMPS DE PRISE: ABBINDEZEIT: TIEMPO DE FRAGUADO: TEMPO DI PRESA:	5'30"	~ 25'

Should the temperature of the material deviate noticeably from 23°C (74°F), the total working and setting times will be effected. • Une température du matériau nettement éloignée de 23°C (74°F) a une influence sur le temps de travail total et sur le temps de prise. • Eine erheblich von 23°C (74°F) abweichende Produkttemperatur beeinflusst die Gesamtverarbeitungs- und Abbindezeit. • Una temperatura del producto que difiera significativamente de los 23°C (74°F), altera el tiempo de trabajo total y de fraguado. • Una notevole differenza di temperatura da 23°C (74°F), influisce sul tempo totale di lavoro e sul tempo di presa.

LINEAR DIMENSIONAL CHANGE: VARIATION DIMENSIONNELLE LINEAIRE: LINEARE MAßÄNDERUNG: CAMBIO DIMENSIONAL LINEAR: VARIAZIONE DIMENSIONALE LINEARE:	- 0,20 %
RECOVERY FROM DEFORMATION: MEMOIRE ELASTIQUE: RÜCKSTELLUNG NACH VERFORMUNG: RECUPERACIÓN ELÁSTICA: MEMORIA ELÁSTICA:	99,5 %

SALE FORMAT:
CONDITIONNEMENT:
VERKAUFSPACKUNGEN:
CONFECCION DE VENTA:
CONFEZIONI DI VENDITA:

	SPARE PARTS	MAJOR TOTAL SOFT STANDARD SET (CODE C3500)	MAJOR TOTAL SOFT REFILL PACKAGE (CODE C3501)
	C3508 Major Total Soft Cartridge (50 ml)	1 x	2 x
	C3502 Silicone Sealant Cartridge (50 ml)	1 x	-
	C3504 Mixing tips Ø 6,5 mm	6 x	12 x
	C3505 Mixing tips Ø 3,2mm	6 x	-
	C3503 MTS Adhesive (10 ml)	1 x	-
	C3507 Brush Handle	1 x	-
	C3506 Brush	20 x	-
	C3509 Polishing Discs	2 x	-
	C3510 Steel bur	-	-

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
← 2'15" →				
11	12	13	14	15
← 1'30" →				



MAJOR Prodotti Dentari S.p.A.
via Einaudi 23, 10024 Moncalieri - ITALY
Tel. +39 011 6400211 - Fax.+39 011 6400222 / 6402325
www.majordental.com - info@majordental.com

